












Modalités de demande:

- SDT
- Ordonnance type
- DxCare

# PANSEMENT A VISEE ANTIMICROBIENNE


<b>SORBACT® Pansement hydrogel 7,5X15cm / 752106</b>			
<b>SORBACT® Pansement hydrogel 7,5x7,5cm / 752072</b>			
<b>SORBACT® Pansement absorbant 10x20cm / 752074</b>			
<b>SORBACT® Pansement superabsorbant 10*20cm / 752108</b>			

## INDICATIONS

Plaies infectées ou signes de colonisation critique

### COMPOSITION

- DACC : chlorure de dialkyl carbamoyle, dérivé d'acide gras hydrophobe

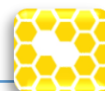

### PROPRIÉTÉS

- Hydrophobicité qui permet la fixation, l'inactivation et l'élimination des pathogènes



### CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité
- Crèmes grasses, solutions hydrophobes → réduction de l'activité
- Radiothérapie



### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Irritation possible de la peau péri-lésionnelle → changement moins fréquent
- Ne dispense pas d'un traitement anti-infectieux approprié



- Nettoyer à l'eau et savon doux ou selon la prescription médicale pour les plaies aiguës
- Sécher délicatement le pourtour de la plaie avec une compresse
- Découper à la forme souhaitée (sauf absorbants) et placer la trame verte en contact avec la plaie

**CONDUITE  
SOIGNANTE**



- Renouvellement tous les jours.

**FREQUENCE DE  
CHANGEMENT**

