

Modalités de demande :

- SDT
- Ordonnance type
- DxCare

# PANSEMENTS HYDROCELLULAIRES SUPER-ABSORBANTS



PANSEMENT SUPER ABSORBANT 10\*10cm RESPOSORB / 750178  
PANSEMENT SUPER ABSORBANT 10\*20cm RESPOSORB / 750181  
PANSEMENT SUPER ABSORBANT 20\*40cm RESPOSORB / 750180  
PANSEMENT SUPER ABSORBANT 37X56cm DRYMAX EXTRA SOFT / 750013 (réservé UF183)

## INDICATIONS

Plaies aiguës et chroniques exsudatives, en phase de détersion ou de bourgeonnement

## ABSORPTION




## EVALUATION COLORIELLE



## COMPOSITION

- **Plusieurs couches internes** : dont une couche hydrophile permettant le passage de l'exsudat grâce à des polymères absorbants.
- **Une couche externe déperlante** : permet les échanges gazeux

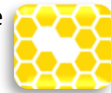

## PROPRIÉTÉS

- **Capacité d'absorption** > 100g / 100cm<sup>2</sup> en 30 minutes (norme NF-EN 13726-1).
- Cette capacité d'absorption passe à plus de 50g / 100cm<sup>2</sup> **sous charge**.
- La **capacité de rétention des exsudats** sous pression et après absorption libre est 65g / 100cm<sup>2</sup> en 30 minutes.
- La **couche externe déperlante** permet des échanges gazeux en surface.



## CONTRE-INDICATIONS

- Plaies sèches ou peu sécrétantes
- Sensibilité connue à l'un des excipients



## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Eviter toute superposition. Il n'est pas recommandé d'utiliser un pansement secondaire (type « pansement américain »)
- DRYMAX EXTRA SOFT® est réservé aux services de médecine vasculaire (lymphœdèmes, ulcères de jambe..)



- Nettoyer la plaie avec de l'eau ou du sérum physiologique
- Sécher le pourtour de la plaie
- Positionner le pansement sur la plaie, en dépassant de quelques centimètres en périphérie

CONDUITE  
SOIGNANTE



- Changer le pansement à saturation
- En fonction de l'importance de l'exsudat

APPLICATION

