

Modalités de demande :

- SDT
- Ordonnance type
- DxCare

# PANSEMENTS HYDROCELLULAIRES



MEPILEX® EM 7,5x8,5cm / 752160  
Réservé ARPSI et Réa médicale

MEPILEX® plaque  
12,5x12,5cm / 752055  
MEPILEX® plaque  
10x21cm / 752056

ALLEVYN® Gentle Border  
10x10cm / 752041  
ALLEVYN® Gentle Border  
10x20cm / 752042

ALLEVYN® Gentle Border  
multisite 17\*17cm / 752110  
ALLEVYN® Life XL / 752111

AQUACEL® Foam Sacrum  
24x21,5cm / 752051  
Réservé au Bloc Digestif


## INDICATIONS

- Plaies aiguës sans distinction de phase
- Plaies chroniques en phase de bourgeonnement, traitement séquentiel

## ABSORPTION



## EVALUATION COLORIELLE

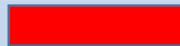

## COMPOSITION

- Composé de plusieurs couches dont une couche hydrophile de polymères absorbants et éventuellement une couche externe
- Pouvoir absorbant différent entre « absorption importante et absorption moyenne »



## PROPRIÉTÉS

- Capacité d'absorption élevée **par capillarité** mais aussi **par rétention** au sein de la structure hydrocellulaire
- **Pas de délitement, ni macération, ni odeur** → plus de confort
- **N'adhère pas à la plaie** : respect des bourgeons néo-formés → moins de douleurs
- **Semi-perméable** → permet la douche



## CONTRE-INDICATIONS

- Plaies infectées, plaies sèches ou peu sécrétantes
- Sensibilité connue à l'un des composants



## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser avec des agents oxydants (eau oxygénée, Dakin®...)



- Nettoyer la plaie avec de l'eau ou du sérum physiologique
- Sécher le pourtour de la plaie
- Positionner le pansement sur la plaie, en dépassant de quelques centimètres en périphérie
- Si le pansement hydrocellulaire utilisé est non-adhésif, appliquer un pansement secondaire : **film, compresse** ou **bande**.

- Tous les 4 à 5 jours
- Fonction de l'importance de l'exsudat
- Si changement trop fréquent, utiliser un pansement plus absorbant → Classe des super-absorbants

## CONDUITE SOIGNANTE



## FREQUENCE DE CHANGEMENT

