

Modalités de demande :

- SDT
- Ordonnance type
- DxCare

# PANSEMENT IRRIGO- ABSORBANT

**HYDROCLEAN Advance plaque 7,5x7,5cm / 752154**

**HYDROCLEAN Advance Cavity diamètre 5,5cm / 752155**

**HYDROCLEAN Advance Cavity ovale 4X8cm / 752156**

**HYDROCLEAN Advance ovale 8X14cm / 752163**

**HYDROCLEAN Advance mini 3cm / 752162**



## INDICATIONS


- Plaies nécrotiques ou fibrineuses à déterger
- Plaies cavitaires avec décollement

## EVALUATION COLORIELLE



## COMPOSITION

- Face interne : textile en polymère
- Coussinet absorbant : gel en polycrilate de sodium inclus dans des fibres de cellulose de bois et de coton, activé par de la solution de Ringer

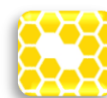

## PROPRIÉTÉS

- Favorise la déterction et le bourgeonnement des plaies nécrotiques sèches ou exsudatives
- Ramollit la nécrose et la fibrine et permet leur élimination
- Permet les échanges gazeux et peut-être utilisé sur des plaies infectées
- Absorbe, piège et régule les exsudats, bactéries et métalloprotéases



## CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité
- Nécroses distales d'origine artérielle



## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Possible macération des berges sans gravité (effet blancheur)
- Face détersive à mettre au contact de la plaie pour la forme *advance*
- Ne pas mettre de pansement secondaire absorbant (bande de fixation ou film polyuréthane)



- Nettoyer à l'eau et savon doux
- Déterger les tissus fibrino-nécrotiques
- Appliquer le pansement de dimension adéquate au contact du fond de la plaie, possibilité de superposer plusieurs formes « *cavity* »
- Pansement secondaire: Film semi-perméable polyuréthane

## CONDUITE SOIGNANTE



- Renouvellement quotidien

## FREQUENCE DE CHANGEMENT

